

bloomea

PARIS



NeoLift

SKIN EXPERT

RALENTIR OU REMONTER LE TEMPS ? EN COMBINANT LES TECHNOLOGIES TECAR ESTHÉTIQUE & ELECTROSTIMULATION

NOTRE
PROMESSE



TRAITEMENT POUR LE VISAGE

- **DRAINER** ET REDONNER DE L'ÉCLAT
- **ESTOMPER** LES RIDES ET IMPERFECTIONS
- **RAFFERMIR** LES TISSUS CUTANÉS
- **LIMITER** LA RÉTENTION LIQUIDIENNE
- **REMODELER** LES CONTOURS DU VISAGE

STIMULER LES RESSOURCES NATURELLES DE VOTRE PEAU

Le soin NeoLift produit des effets **rapides et efficaces**



1

ACTIVE ET STIMULE
LES FIBRES DE
COLLAGÈNE ET LES
FIBROBLASTES

2

TONIFIE
LA MUSCULATURE
SOUS-JACENTE

3

DIMINUE LE STRESS
ET AMÉLIORE LA
RELAXATION

ZONES ET PROBLÉMATIQUES TRAITÉES

Prévention et correction du vieillissement cutané

De 25 à 99 ans

VISAGE

COU

DÉCOLLETÉ



SQUELETTISATION

Joues creusées / Rides profondes sur le front / Contours des yeux marqués / Orbites enfoncées / Contour des lèvres plissé



RELACHEMENT

Paupières tombantes / Pommettes affaissées / Sillons nazogéniens marqués / Bajoues / Ovale du visage relâché

UN DUO ÉLECTRIQUE PERFORMANT

Aujourd'hui Bloomea repousse les limites de la technologie **au service de la beauté** pour les traitements visage en **associant simultanément 2 types de courants dans une même technologie** :


LA TECAR-ESTHÉTIQUE

un **courant de haute fréquence** pour régénérer les couches de la peau.

+

L'ÉLECTROSTIMULATION

un **courant de basse fréquence** qui va éliminer les tensions.

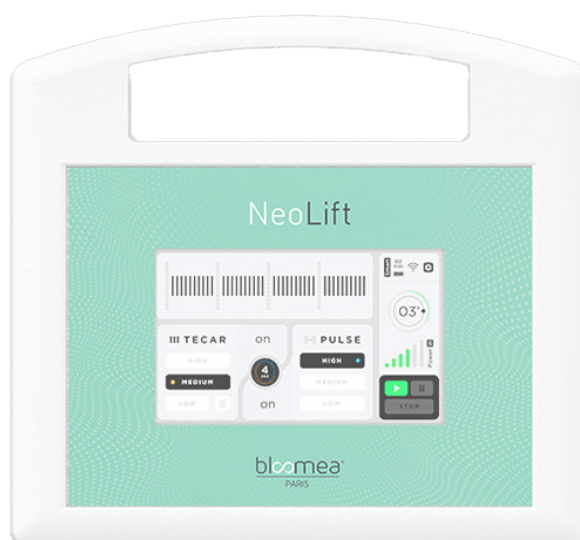

UNE MÉTHODE **NON INVASIVE ET INDOLORE**

Cette association de courants garantit un **effet lifting en profondeur** et la **réjuvénation de la peau du visage**.

DES RÉSULTATS **EFFICACES ET RAPIDES**

Un traitement **confortable** qui ouvre des **perspectives inégalées** dans les champs d'application de la beauté.

L'ASSOCIATION DE LA TECAR ET DU

ELECTROSTIMULATION / PULSE

L'action des **courants de basse fréquence** va permettre de **libérer les muscles de leurs tensions et redonner la mobilité des fascias**. Ce traitement redonne de la tonicité aux muscles, tout en améliorant la micro-circulation cutanée.

La peau retrouve en surface sa vitalité.

PULSE AU SERVICE DE LA BEAUTÉ

TECAR

L'action des **courants de haute fréquence** va permettre une création de chaleur dans les couches de la peau : la **Diathermie**.

Celle-ci entraîne une rétractation des fibres de collagène ainsi qu'une néo-collagénèse.

La peau est raffermie, les rides estompées, le visage resculpté... Les courants de haute fréquence préparent la peau pour la phase de régénération.



NOTRE TECHNOLOGIE NEOLIFT

NeoLift est équipée de **3 pièces à main** :
1 multipolaire et **2 monopolaires**.


Chaque pièce à main permet de diffuser les **2 courants simultanément** :

un **courant de haute fréquence**
pour régénérer les couches de la
peau (TECAR).

+

un **courant de basse fréquence**
qui va éliminer les tensions
(PULSE).

Pièces à main
monopolaires

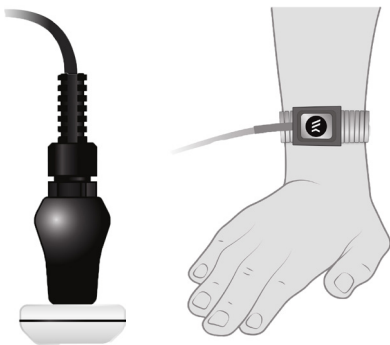

Pièce à main
multipolaire



Gua Sha
(accessoire optionnel)




LES INNOVATIONS NEOLIFT, POUR DES

L'ÉLECTRODE FRACTALE, UNE INNOVATION BLOOMEA



L'électrode fractale permet d'appliquer les deux courants par l'intermédiaire de **86 micro-points** qui concentrent l'énergie et **augmentent la puissance sur la zone travaillée**.

Les impulsions électriques **passent la barrière de l'épiderme et agissent directement dans le derme en stimulant le renouvellement du collagène**, et plus en profondeur au niveau des muscles pour libérer les tensions.

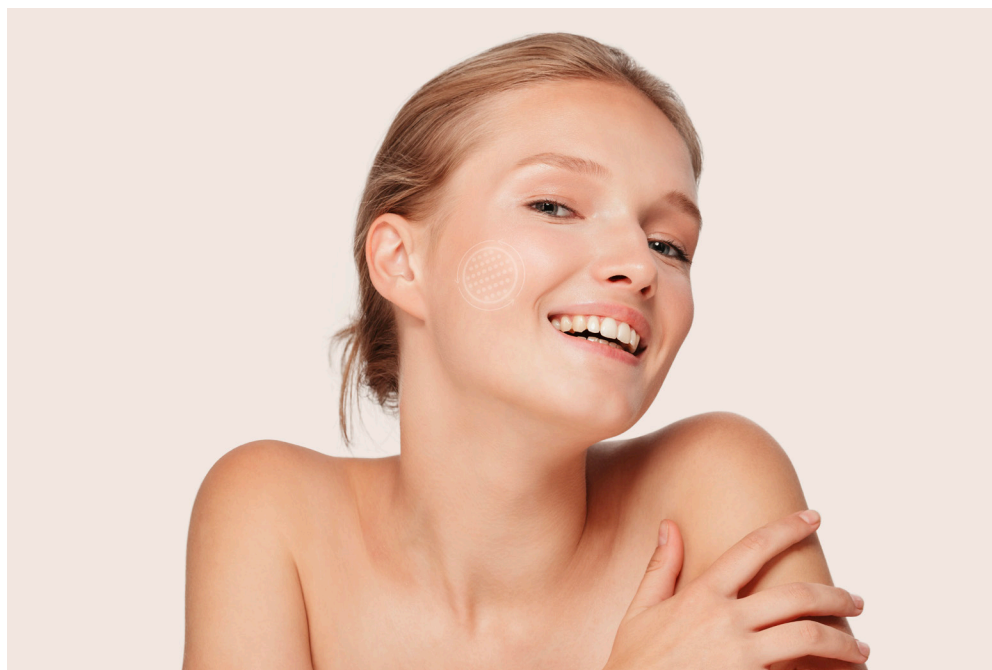

RÉSULTATS VISIBLES RAPIDEMENT

LE BRACELET, LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE VOTRE SAVOIR-FAIRE MANUEL



Grâce à un système de bracelet, **NeoLift réconcilie pratique manuelle et technologie de pointe** afin de pouvoir diffuser l'énergie jusqu'au derme profond via un courant **non invasif et 100% naturel** pour le corps humain.

Les zones les plus délicates peuvent être traitées et la peau peut être « modelée » à votre convenance.

LE GUA SHA BY BLOOMEA, REVOLUTIONNE LES SOINS ET LE MASSAGE ANTI-ÂGE



Issu de la médecine traditionnelle chinoise, le Gua sha est un outil connu depuis des millénaires pour **stimuler et optimiser la circulation du sang, de la lymphe et de l'énergie** grâce à une technique de frottement de la peau à l'aide d'une pierre plate.

Fabriqué généralement avec des pierres semi-précieuses (jade...), il est **utilisé dans les soins du visage et les massages réalisés par les Facialistes** pour ces nombreuses **vertus Anti-Âge**.

Aujourd'hui, Bloomea révolutionne cet outil et modernise son utilisation : Le Gua Sha by Bloomea se pare d'un **alliage métallique afin de pouvoir transmettre le courant TECAR** pour des résultats encore meilleurs.


NEOLIFT AGIT EN SUPERFICIE

ÉLECTRODE MULTI-POLAIRE : ÉPIDERME & DERME SUPERFICIEL

L'électrode multipolaire possède 3 pôles dynamiques qui passent successivement en émission ou réception de courant. 2 pôles sur 3 sont actifs simultanément.

ÉLECTRODE FRACTALE : DE L'ÉPIDERME AU MUSCLE

Applicateur de radiofréquence fractionnée (sans aiguille). Elle délivre 86 faisceaux de stimulation simultanés.

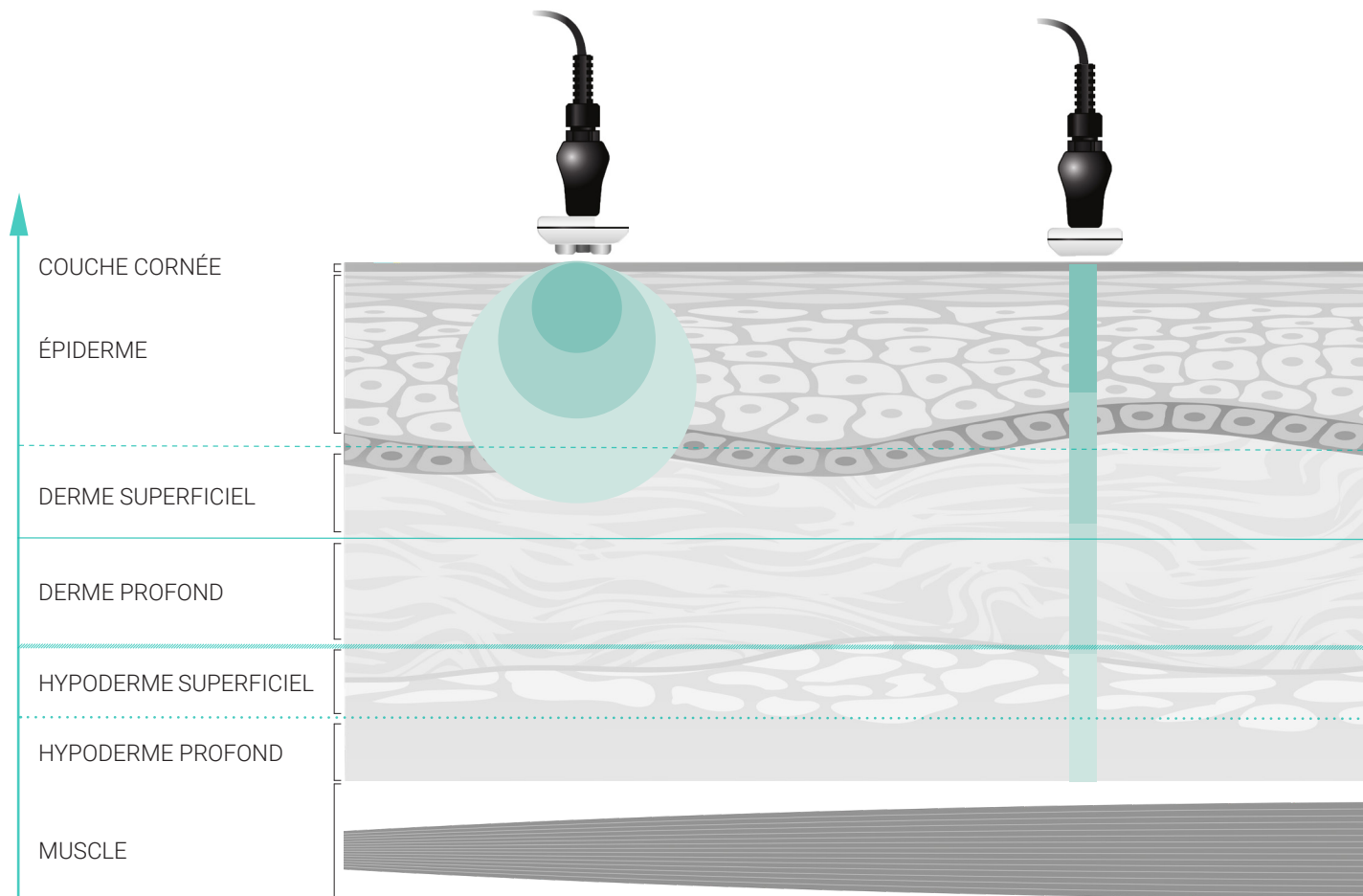

COMME EN PROFONDEUR


BRACELET : DERME SUPERFICIEL & PROFOND

Le bracelet permet au courant de passer par la main du praticien pour diminuer les rides et retendre la peau en stimulant la synthèse de collagène de manière naturelle, non invasive et très agréable.



BRACELET + GUA SHA : *(accessoire optionnel)*

Utilisé en complément du bracelet, le Gua Sha active la micro-circulation et le drainage lymphatique.

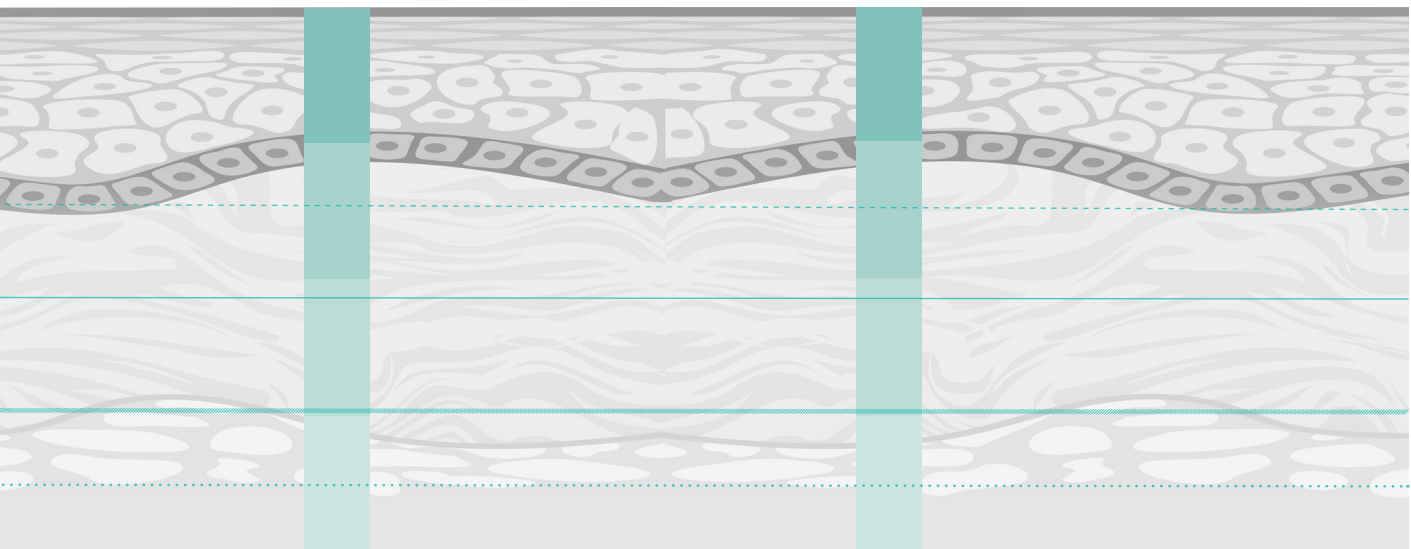

LES AVANTAGES POUR VOUS

- SOINS DE **COURTE DURÉE** = POSSIBILITÉ DE DOUBLER VOTRE CAPACITÉ DE SOIN ET DONC VOTRE CHIFFRE D'AFFAIRES
- RÉSULTATS **VISIBLES RAPIDEMENT**, DÈS LA 1ÈRE SÉANCE
- ALLIANCE ENTRE **TECHNIQUES MANUELLES DE MASSAGE ET TECHNOLOGIES**
- APPAREIL **LÉGER ET TRANSPORTABLE FACILEMENT**
- APPAREIL **FONCTIONNANT SUR BATTERIE (RECHARGEABLE)**

LES AVANTAGES POUR VOTRE CLIENT

- RÉSULTATS **VISIBLES DÈS LA 1ÈRE SÉANCE**
- **EFFET DURABLE** EN MAINTENANT **1 SÉANCE TOUS LES MOIS**
- SÉANCES **NON INVASIVES ET INDOLORES**
- SÉANCES **CONFORTABLES, EFFET RELAXANT**

ET SI VOUS ALLIEZ PLUS LOIN AVEC LE **SOIN GLOBAL FACE**

La combinaison des technologies **La Fontaine** et **NeoLift**, avec des cosmétiques de pointe permet de **cibler les 3 couches de la peau et les muscles du visage, du cou et du décolleté.**

Des soins sur-mesure pour atteindre des résultats inégalés dans la **prévention** et la **correction de l'âge.**



LE PLUS DE NEOLIFT

L'appareil NeoLift petit, léger et portable

CARACTÉRISTIQUES

Bande Fréquence 2400-2483.5 MHz
Poids 1.2kg
Dimensions 22.2x20.5x0.8 cm
Puissance d'entrée 100-240 Vac - 50/60 Hz
Consommation maximale 90 VA

CONDITIONS D'UTILISATION

Température -10 à 40°C
Humidité 20 à 90 %
Pression 800 à 1060 hPA

CONDITIONS DE STOCKAGE

Température -20 à 70°C
Humidité 10 à 95 %
Pression 800 à 1060 hPA

ACCESSOIRES

1 Electrode FRACTALE
1 Electrode MULTIPOLAIRE
1 plaque de retour neutre mobile
1 bracelet
1 fix pad neutre
1 câble RET
1 câble neutre

ACCESSOIRES OPTIONNEL

Gua Sha

Garantie 2 ans équipement – 1 an accessoires



NOTRE TECHNOLOGIE DERNIÈRE GÉNÉRATION

Aesthetic Modeline
Bloomea Paris
20 chemin Louis Chirpaz,
69130 Ecully, France.

+33 (0) 9 86 34 45 73
contact@bloomea.com
www.bloomea.fr

bloomea[®]
PARIS